




**Tefal**  
baby home

# PÈSE-BÉBÉ Baby-scales



F  
NL  
D  
I  
GB  
GR  
TR  
RUS  
UA  
PL  
CZ  
SK  
H  
BG  
RO  
HR

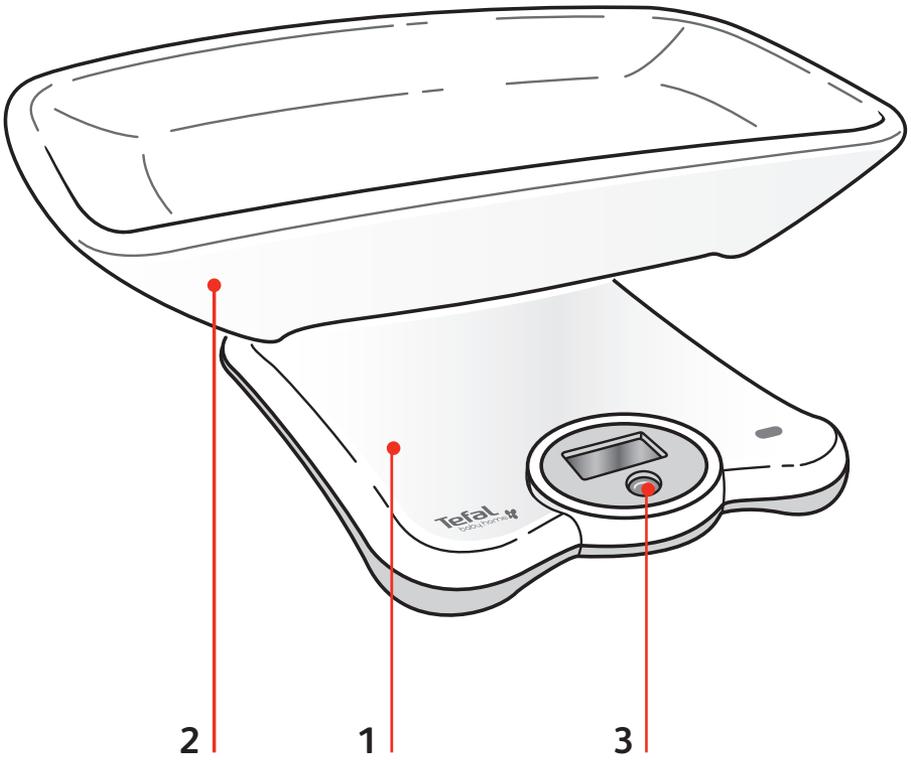

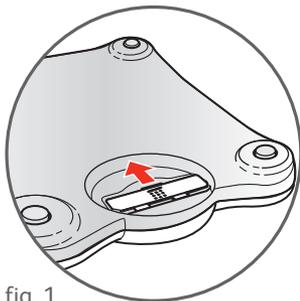


fig. 1

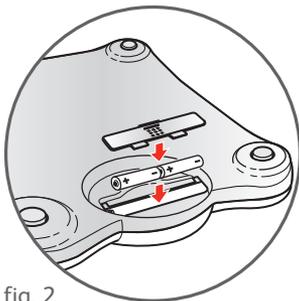


fig. 2

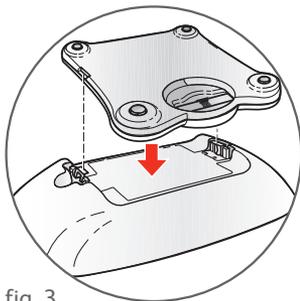


fig. 3

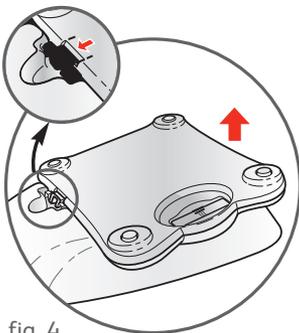


fig. 4

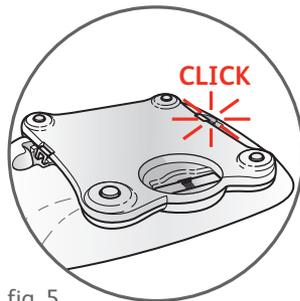


fig. 5

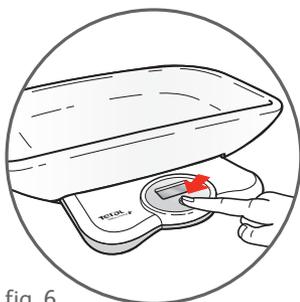


fig. 6

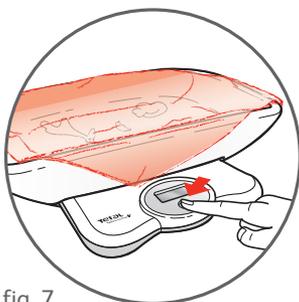


fig. 7



fig. 8

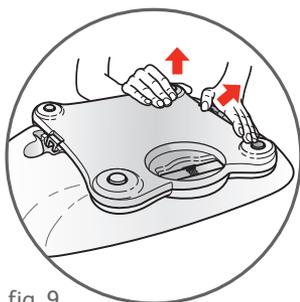


fig. 9

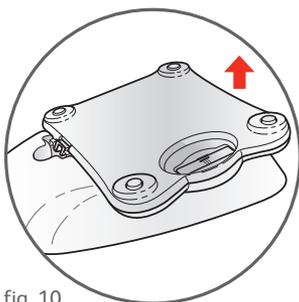


fig. 10



fig. 11

## Description

- 1 – Balance
- 2 – Nacelle
- 3 – Bouton Marche/Arrêt – Tare

## Avant la première utilisation

### Mise en place des piles

Retirer le couvercle du compartiment de piles (en dessous de l'appareil **fig. 1 – fig. 2**), puis insérer 2 piles alcalines neuves et identiques de 1,5 V type LR03 – AAA (vérifier la date limite d'utilisation). Refermer le couvercle.



Ne pas jeter les piles usées : traitez-les comme des résidus chimiques.

### Mise en place de la nacelle

Retourner la nacelle et présenter le plateau également retourné (**fig. 3**). Centrer les encoches en face des indications “CLICK” (**fig. 4 – fig. 5**) et appuyer jusqu'à obtention du “CLICK”.

Retourner l'ensemble. Le produit est prêt pour la pesée.

### Précaution d'emploi

- Ne pas disposer près d'une source de chaleur.
- Les appareils tels que les fours à micro-ondes ou téléphones cellulaires utilisés à proximité de la balance peuvent provoquer des perturbations de l'affichage du poids.
- Pour l'entretien, nettoyer avec une éponge humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne jamais plonger dans l'eau.
- Pour le rangement, bien veiller à ce que l'appareil soit éteint. Ne rien poser dessus.

## Fonctionnement

### Mise en marche – Pesée

Disposer le pèse-bébé (**fig. 6**) sur une surface plane et dure en vous assurant qu'il est bien stable et sans contact avec un objet.

Appuyer sur la touche **(O/I)**, l'écran affiche **8888** puis **0,0**.

Si vous glissez une serviette sur la nacelle, appuyer de nouveau sur **(O/I)** pour déduire son poids (**fig. 7**). L'écran affiche **0000** puis **0,0**. Installer le bébé (**fig. 8**).

Le poids s'affiche pendant environ 40 secondes.

A la première utilisation, le clignotement du poids indique qu'il est mémorisé.

## Ecart de poids

Lors de la pesée suivante, l'écart de poids est calculé par rapport à la pesée précédente.

Après stabilisation, le poids et l'écart de poids s'affichent en alternance pendant environ 40 secondes, indiquant que le dernier poids est mémorisé.

Il convient de peser l'enfant régulièrement, car l'affichage de l'écart de poids avec la pesée précédente est limité à 1 kg. Le dépassement de cette limite entraîne la remise à zéro de la mémoire (reprendre à la première utilisation).

Cette fonction n'est possible que pour un bébé dont le poids est supérieur à 2 kg.

## Arrêt

L'appareil s'arrête automatiquement :

- Après environ 40 secondes d'affichage du poids.
- Dès que l'on enlève l'enfant.
- Après environ 40 secondes de mise en marche sans pesée.

L'appareil s'arrête manuellement en appuyant sur la touche  à l'affichage de .

## Pèse-enfant (debout sur le plateau)

Retourner le pèse-bébé et déclipser la nacelle d'une main (**fig. 9 – fig. 10**), tout en soulevant la balance de l'autre main.

Le fonctionnement reste identique (voir Mise en marche – Pesée).

L'enfant prend place debout sur le plateau en restant immobile (**fig. 11**).

Ne pas dépasser le poids maximum de 20 kg.

## Affichages spéciaux

-  Indicateur d'usure des piles.
-  Indicateur de remise à zéro. déduction de poids maximum : 2 kg.
-  Indique que le poids est supérieur à 20 kg.  
Ne pas dépasser la charge maximum.
-  Apparaît lorsque l'on dépose sur le plateau une charge supérieure à 2,5 kg avant la mise en marche. Retirer la charge du plateau. Mettre en marche avant de procéder à la pesée.
-  (valeur négative) Apparaît lorsqu'on retire le poids du plateau après la mise en marche ou lorsque la balance est en contact avec un objet qui gêne son bon fonctionnement.  
Pour revenir à 0, appuyer sur .



### Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.